

SOLO PRESSO STUDI MEDICI

Neo[®] Elite

LO STATO DELL'ARTE NELLA TECNOLOGIA LASER

TRATTAMENTI SENZA DOLORE
PAZIENTI SODDISFATTI
RISULTATI CHE DURANO NEL TEMPO

36 CERTIFICAZIONI FDA



aerolase[®]

Neo Elite è un laser innovativo e particolarmente potente che permette al medico di ottenere ottimi risultati di trattamento con invasività minima e senza dolore. Indicato sia per i laseristi esperti che per i neofiti oltre che per chi cerca un dispositivo ad alta versatilità. Aerolase LightPod, Neo Elite è un sistema brevettato che semplifica l'uso del laser eliminando la necessità di acquistare laser differenti per problematiche specifiche, riducendo molte delle limitazioni al trattamento e minimizzando materiali di consumo e spese di manutenzione tipiche dei laser di vecchia generazione.

Multitasking – Neo Elite è l'unico laser al mondo che con un solo manipolo ha ricevuto l'approvazione FDA Americana per 36 patologie differenti, per il trattamento di tutti i fototipi e in tutte le stagioni.

Facilità d'uso – Semplice da utilizzare, affidabile, con interfaccia intuitiva, raggiunge i risultati desiderati assicurando il comfort del paziente, indipendentemente dall'esperienza di laser pregressa dell'operatore.

Risultati Clinici Affidabili e Replicabili – Ottiene in sicurezza e velocemente i risultati, e tratta senza farmaci patologie di varia natura, grazie a protocolli già sperimentati dai numerosi Key Opinion Leaders.


Compliance dei pazienti altissima – Non invasivo, senza contatto, confortevole per tutti i tipi di pelle, indolore, massimizza la soddisfazione del paziente.

Indicazioni mediche : Acne, Psoriasi, Rosacea e Onicomicosi

Indicazioni estetiche : Vene varicose, Angiomi, Teleangectasie, Epilazione, Ulcere, Ringiovanimento, Nevi, Macchie solari e senili, Riduzione delle rughe, Unghie, Cicatrici, Lesioni pigmentate, Melasma, Poikiloderma, Emangiomi, Verruche.

Parametri unici per una unica lunghezza d'onda

La combinazione di lunghezza d'onda e la durata dell'impulso rendono questo laser il più avanzato e performante nel campo della medicina estetica.


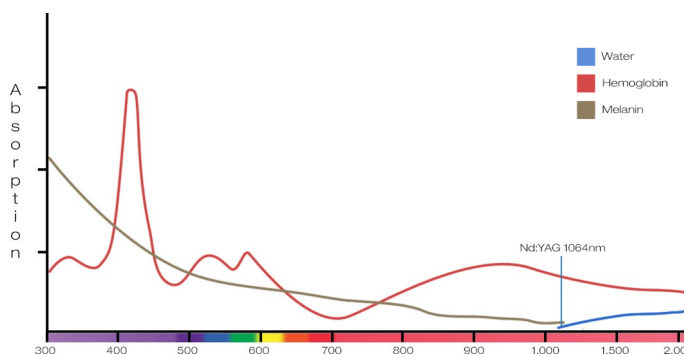


Versatilità unica

Neo Elite Nd:YAG 1064nm è assorbito dai cromofori di emoglobina, melanina e acqua. In virtù del basso assorbimento della melanina, il Neo 1064nm, è più sicuro per le pelli più scure, ed elimina la necessità del raffreddamento dell'epidermide. Questa caratteristica combinata con l'alta potenza e l'impulso unico a 0,65 millisecondi, permette una vasta gamma di trattamenti e opzioni.

Efficacia ineguagliata

L'onda del Neo Elite di 1064nm consente una penetrazione più profonda rispetto ad altri laser di medicina estetica, permettendo di trattare sia problematiche superficiali che profonde. Con la durata d'impulso di 0,65 millisecondi, Neo Elite è in grado di raggiungere i target più profondi, più velocemente, con maggiore efficacia e sicurezza, e senza bisogno di raffreddamento. Con un addizionale impulso da 1,5 millisecondi si arriva fino a una fluensa di 318 J/cm² per il trattamento delle vene profonde negli arti inferiori, verruche e altre lesioni cutanee che richiedono alta potenza.

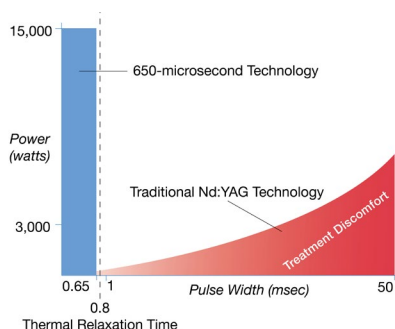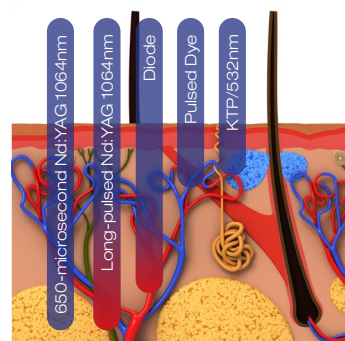

Incredibile combinazione di Comfort e Potenza

Neo Elite rilascia alte e basse fluenze tra i 4 J/cm² e i 255 J/cm² sempre con un impulso di 0,65 millisecondi, che è al di sotto della soglia del Thermal Relaxation Time della cute (0,8 millisecondi). La brevissima durata dell'impulso evita lo stress termico della pelle, che a sua volta elimina la sensazione di dolore ed elimina il rischio di risultati avversi, tipici dei vecchi laser ad impulso più lungo. Tutto ciò permette un trattamento di alto livello, straordinariamente delicato, senza tuttavia comprometterne l'efficacia.

Nuove possibilità per la salute della pelle

Il laser Neo Elite, grazie ad una tecnologia che permette l'emissione di un impulso a 0,65 millisecondi ad alta potenza, ridefinisce lo standard di riferimento dei trattamenti laser per tutte le applicazioni mediche ed è indicato per nuove applicazioni di medicina estetica.

NeoSkin® Ringiovanimento globale della pelle.....



4 Trattamenti


Per gentile concessione di Kevin Pinski, MD



4 Trattamenti

Per gentile concessione di Jason Emer, MD

NeoClear® Trattamento dell'acne.....

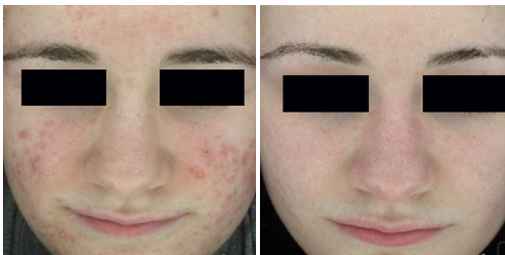

6 Trattamenti

Per gentile concessione di Jason Emer, MD



2 Trattamenti


Per gentile concessione di Bruce Katz, MD

Lesioni vascolari e teleangectasie.....



2 Trattamenti


Per gentile concessione di Ed Zimmerman, MD

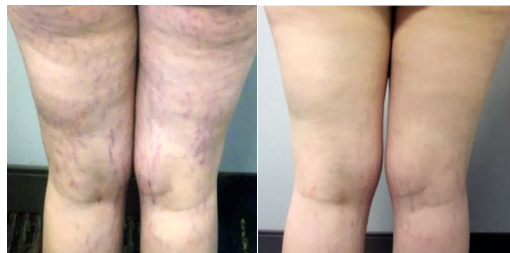

2 Trattamenti

Per gentile concessione di Catherine Durboraw, MD

Fototipi IV-VI.....

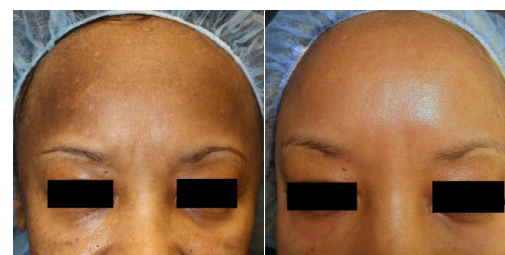

1 Trattamento

Per gentile concessione di Cheryl Burgess, MD



3 Trattamenti

Per gentile concessione di Juliette Hepburn, MD

Aerolase

Dal 1996 Aerolase è all'avanguardia nella ricerca e nello sviluppo clinico volto all'avanzamento della tecnologia laser e delle sue applicazioni. Il nostro marchio e i nostri brand sono frutto della tecnologia laser LighPod, il laser medico estetico raffreddato ad aria.

Il LightPod Neo Elite offre nuovi livelli di versatilità clinica, praticità di utilizzo ed efficienza economica. Aerolase ha minimizzato le dimensioni, mentre ha massimizzato la performance e l'affidabilità. Aerolase rappresenta una nuova era di laser compatti, efficienti e performanti, come si è visto nella elettronica di consumo negli ultimi anni.

Sia i laseristi esperti che i neofiti del laser possono trarre enormi benefici da Aerolase.

Testimonianze dei medici



Occorre considerare che Neo è diverso dagli altri laser Nd:YAG perché agisce nell'ordine di grandezza dei microsecondi e non dei millisecondi. Può facilmente trattare poikiloderma, cicatrici eritematose, cicatrici ipertrofiche, rosacea e teleangectasie. Il Neo permette una riduzione significativa se non risolutiva delle teleangectasie del volto senza effetti avversi.

Dott.ssa Christine Dierickx, Dermatologa, Lussemburgo



Neo è eccellente per il trattamento del melasma. Lo uso nella prima fase di un trattamento in due fasi e lo faccio seguire da un peeling chimico. Nella seconda fase si colpiscono i residui di pigmentazione e si lascia la pelle radiosa. Non c'è nulla di comparabile sul mercato.

Dott.ssa Cheryl Burgess, Dermatologa; Centro di Dermatologia e Chirurgia Dermatologica



Il Neo è un laser superpotente che può trattare tantissime aree del corpo. Il laser ricostruisce il collagene, minimizza i pori, rassoda la pelle e tratta problematiche come la pigmentazione, il rossore, l'acne o i peli superflui. Adoro la sua azione di ringiovanimento e anche combinarlo con i peeling, PRP, i microaghi nella stessa seduta grazie ai parametri unici di questo laser. I miei pazienti amano questo trattamento ed i suoi risultati.

Dott.ssa Rosemary Coleman, Dermatologa, Irlanda



Il mio strumento più remunerativo è il Neo Aerolase. Curo molti pazienti con l'acne e uso il Neo mediamente su 10-15 pazienti al giorno per curare l'acne in modo indolore, con successo e senza farmaci. Può essere utilizzato per tante indicazioni, ma l'acne è il numero uno. Grazie ai suoi eccellenti risultati e al trattamento delicato, fidelizzo i pazienti, cosa unica nel mondo della dermatologia.

Dott. Michael Gold, Dermatologo; Gold Skin Care Center

Specifiche

tipo di laser	Nd:YAG, pulsato
lunghezza d'onda	1064nm
fluenza	fino a 318 J/cm ²
ampiezza di impulso	0,65 millisecondi, 1,5 millisecondi
dimensione del raggio	fino a 10mm
alimentazione	115 VAC / 230 VAC, commutabile
sistema di raffreddamento laser	ad aria (brevettato)
dimensione laser completa	15.2cm x 35.5cm x 48.3cm
peso	ca. 11 kg



Distributore in esclusiva per l'Italia
Via Umberto Giordano, 70 - 00124 Roma
www.enermedica.it
info@enermedica.it
800 911 820

Max Energia Impulso	20 J
Ampiezza Impulso	0.1 - 50msec
Lunghezza d'onda	1064nm



MADE IN USA